



HOVERSLING®

Split-Leg



HOVERSLING®

Repositioning Sheet

Brukerhåndbok



Besøk www.HoverMatt.com for andre språk

INNHALDSFORTEGNELSE

Symbolreferanse.....	2
Tiltenkt bruk og forholdsregler.....	3
Deleidentifikasjon – HoverSling® Split-Leg	4
Produktspesifikasjoner/nødvendig tilbehør for HoverSling® Split-Leg	4
Bruksanvisning for HoverSling® Split-Leg som overføringsmadrass	5
Bruksanvisning for HoverSling® Split-Leg som slynge.....	5-6
Deleidentifikasjon – HoverSling® repositioneringslaken.....	7
Produktspesifikasjoner/nødvendig tilbehør for HoverSling® repositioneringslaken.....	7
Feste slyngestropper for HoverSling® repositioneringslaken	7
Bruksanvisning for HoverSling® repositioneringslaken som overføringsmadrass ..	8
Bruksanvisning for HoverSling® repositioneringslaken som slynge.....	8-9
Bruksanvisning for HoverSling® repositioneringslaken for sittende overføringer	10
Deleidentifikasjon – HT-Air® 1200 Air Supply.....	11
Tastaturfunksjoner for HT-Air® 1200 Air Supply.....	11
Rengjøring, preventivt vedlikehold/infeksjonskontroll	12
Returer og reparasjoner	13

Symbolreferanse

	CE-SAMSVARSMERKING		LATEKSFRI
	UK-SAMSVARSMERKING		VARENUMMER
	AUTORISERT REPRESENTANT		PRODUSENT
	ANSVARLIG PERSON I STORBRITANNIA		PRODUKSJONSDATO
	AUTORISERT REPRESENTANT I SVEITS		MEDISINSK APPARAT
	FORSIKTIG / ADVARSEL		ENKELTPASIENT – FLERBRUK
	IMPORTØR		MÅ IKKE VASKES
	AVHENDING		UNIK UTSTYRS-ID
	BRUKSANVISNING		PASIENTENS VEKTGRENSE
	BRUK TO PLEIERE		HOLD LITEN AVSTAND
	LÅS ALLE HJUL		TØM LUFT, HEV SKINNER
	SØRG FOR AT PASIENTEN LIGGER FLATT		HENGESTANG I LØKKESTIL
	SENTRER PASIENTEN		FEST TILKOBLINGSSTROPP
	FEST PASIENTSTROPPE		FOTENDE



SAMSVARSERKLÆRING

Dette produktet oppfyller kravene i forordningen for medisinsk utstyr (2017/745).
Dette produktet oppfyller også kravene i: ISO 10535

Tiltenkt bruk og forholdsregler

TILTENKT BRUK

The HoverSling® Split-Leg og HoverSling® Repositioning Sheet er kombinerte luftassisterte overføringsmadrasser og løftesyngler. Ved bruk som luftassistert madrass blåser HoverTech Air Supply opp HoverSling for å dempe og beskytte pasienten, mens luft samtidig slipper ut av hullene på undersiden, slik at kreftene som kreves for å flytte pasienten reduseres med 80–90 %. For dette bruksområdet kan HoverSling brukes for å hjelpe pleiere med sideveis pasientflytting, posisjonering (inkludert løfting og snuing) og vipping. HoverSling kan også brukes ikke-opplåst for vertikale pasientløft, snuing og vipping med en hengestang i løkketype.

INDIKASJONER

- Pasienter som ikke kan bidra med egen sideveis eller vertikal flytting.
- Pasienter hvis vekt eller størrelse utgjør en potensiell risiko for pleierne som er ansvarlige for reposisjonering, vertikal flytting eller sideveis flytting av pasienten.

KONTRAINDIKASJONER

- Pasienter som er utsatt for brudd i bryst, livmorhals eller lumbal som anses som ustabile må ikke bruke HoverSling med mindre en klinisk beslutning er tatt på stedet.

TILTENKTE PLEIOMRÅDER

- Sykehus, anlegg for langsiktig pleie

FORHOLDSREGLER – FOR BRUK SOM EN LUFTASSISTERT OVERFØRINGSMADRASS

- Pleiere må kontrollere at alle bremser er aktivert før overføringen.
- Bruk minimum to pleiere under luftassistert pasientflytting sideveis.
- For luftassisterte posisjoneringsoppgaver i sengen kan det være nødvendig med mer enn én pleier. Sideskinner må heves med én pleier.
- For luftassistert vipping, se HoverTechs video på www.HoverMatt.com.
- Pasienten må aldri forlates uten tilsyn på en opplåst HoverSling.
- HoverSling må bare brukes for sitt tiltenkte formål som beskrevet i denne bruksanvisningen.
- Bruk bare tilbehør og/eller ekstrautstyr som er godkjent av HoverTech.
- Ved overføring til en seng med lavt lufttap bør sengemadrassens luftflyt settes til høyeste nivå for å få en fast overføringsoverflate.
- Aldri forsøk å flytte en pasient sideveis på en ikke-opplåst HoverSling.
- Sørg for at pasienten er sentrert på HoverSling før oppblåsning.

FORHOLDSREGLER – LUFTTILFØRSEL

- Legg strømedningen slik at den ikke utgjør noen fare. Luftinntakene på Air Supply må ikke blokkeres.
- Ved bruk av HoverSling i et MR-miljø kreves en spesialslange for MR på 25 fot (tilgjengelig for kjøp).
- FORSIKTIG: Unngå elektrisk støt. Air Supply må ikke åpnes.
- Se produktspesifikke bruksanvisninger for bruksinstruksjoner.

FORHOLDSREGLER – FOR BRUK SOM SLYNGE

- For sideveis pasientflyttinger kan det være nødvendig med mer enn

én pleier.

- For posisjoneringsoppgaver i sengen kan det være nødvendig med mer enn én pleier. Sideskinner må heves med én pleier.
- For vipping, se HoverTechs opplæringsvideo på www.HoverMatt.com.
- HoverSling må bare brukes av opplært personell.
- Bruk bare tilbehør og/eller ekstrautstyr som er godkjent av HoverTech.
- Før bruk må det gjennomføres en risikovurdering for å sikre at HoverSling i riktig størrelse brukes for pasienten.
- Det må gjennomføres en klinisk vurdering av en kvalifisert sykepleier og terapeut før pasienter løftes med HoverSling.
- HoverSling Split-Leg sideveis-overføringshåndtak må ikke brukes til å løfte. Overdreven kraft på sideveis overføringshåndtak kan føre til at HoverSling revner.
- Kontroller at HoverSling ikke er festet til noe annet objekt enn hengestangen av løkketype.
- Ved tilkobling av hengestangen av løkketype må det sikres at skulderstroppens løkkefarger samsvarer på pasientens venstre og høyre side, og at beinstroppens løkkefarger samsvarer på pasientens venstre og høyre side.
- Når slyngens støttestropper er helt uttrukket må det sikres at de er riktig koblet til hengestangen før pasienten løftes.
- For sittende løft må det sikres at pasienten sitter sikkert i HoverSling® før flytting eller løfting.
- En pasient må aldri løftes høyere enn det som er nødvendig for å gjennomføre løftet/flyttingen.
- Pasienten må aldri forlates uten tilsyn under bruk av HoverSling.
- HoverSling må brukes i henhold til både løfterens og HoverSling's instruksjoner.
- Hvis vektgrensen varierer mellom pasientløfteren, hengestangen og HoverSling gjelder den laveste vektgrensen.



Hvis det er noen indikasjoner på skade må HoverSling tas ut av tjeneste og avhendes.




Sideskinner må heves med én pleier.



På operasjonsstuen – For å hindre at pasienten glir, må HoverSling alltid tømmes og pasienten og HoverSling festes til operasjonsbordet før bordet flyttes til en vinklet posisjon.

Deleidentifikasjon – HoverSling® Split-Leg

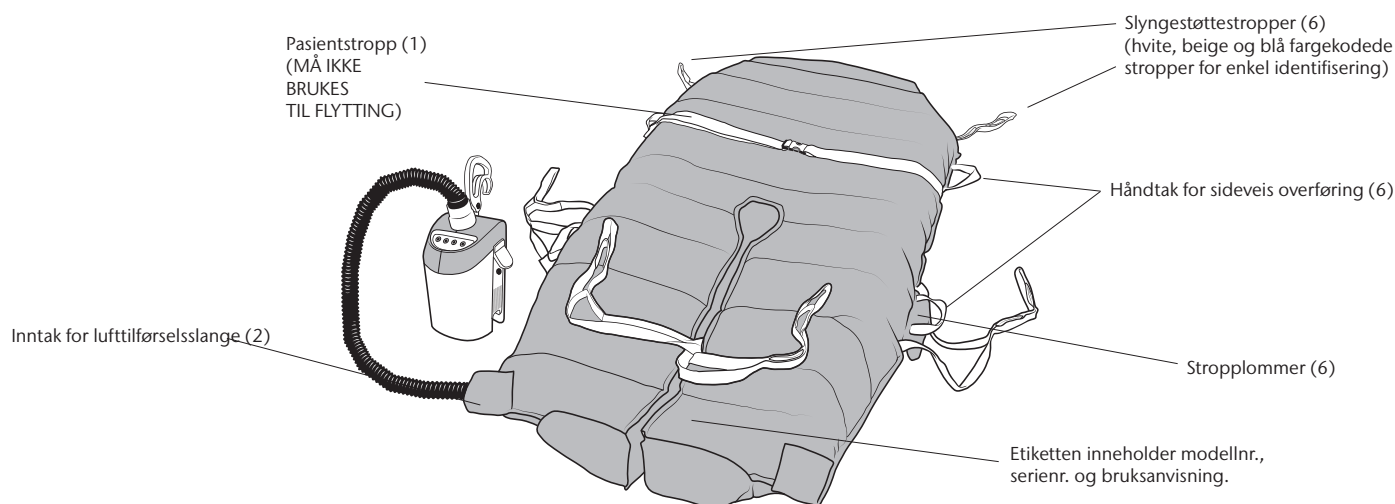

Produktspesifikasjon/nødvendig tilbehør

HOVERSLING® SPLIT-LEG

Materiale:	Topp: Polyesterstrikk Bunn: Nylonwill
Konstruksjon:	Sydd
Bredde:	34" (86 cm)
Lengde:	178 cm (70")

Modellnummer: HMSLING-34-B* – 34" W x 70" L (10 per eske)



GRENSE 318 KG / 700 LBS

*Pustende modell

NØDVENDIG TILBEHØR FOR BRUK SOM OVERFØRINGS- RINGSMADRASS:

Modellnummer: HTAIR1200 (Nord-amerikansk versjon) – 120V~, 60 Hz, 10A
Modellnummer: HTAIR2300 (Europeisk versjon) – 230V~, 50 Hz, 6A
Modellnummer: HTAIR1000 (Japansk versjon) – 100V~, 50/60 Hz, 12,5A
Modellnummer: HTAIR2356 (Koreansk versjon) – 230V~, 50/60 Hz, 6A
Modellnummer: AIR200G (800 W) – 120V~, 60Hz, 10A
Modellnummer: AIR400G (1100 W) – 120V~, 60Hz, 10A

NØDVENDIG TILBEHØR FOR BRUK SOM SLYNGE:

En pasientløfter med 2-, 3- eller 4-punkts hengestang i løkkestil ment for bruk med:

- Mobile løftere med slyngeseter
- Løftetraller
- Stasjonære løftere festet til vegg/vegger, gulv og/eller tak
- Stasjonære, frittstående løftere

Bruksanvisning for HoverSling® Split-Leg som overføringsmadrass

1. Sørg for at slyngestøttestroppene oppbevares i stropplommene, og at de fire (4) koblingene på de midtre ben- og fotseksjonene er koblet til.
2. Pasienten bør helst ligge på ryggen.
3. Plasser HoverSling Split-Leg under pasienten ved hjelp av rulleteknikk og fest pasientsikkerhetsstroppen løst.
4. Sett støpselet på HoverTech Air Supply i en stikkontakt.
5. Sett slangedysen inn i en av de to slangeinngangene i fotenden av HoverSling Split-Leg og klikk den på plass.
6. Sørg for at forflytningsoverflatene er så nærme hverandre som mulig, og lås alle hjulene.
7. Utfør om mulig forflytningen fra en høyere overflate til en lavere overflate.
8. Slå på HoverTech Air Supply.
9. Skyv den oppblåste HoverSling Split-Leg i en vinkel, enten med hodet eller føtten først. Når slyngen er halvveis tar den andre pleieren tak i de nærmeste håndtakene og trekker den til ønsket plassering.
10. Sørg for at pasienten er sentrert på ønsket overflate før luften slippes ut.
11. Slå av Air Supply og aktiver sengeskinnene. Løsne pasientstroppen.

Bruksanvisning for HoverSling® Split-Leg som slynge

BRUKSANVISNING – PASIENT I SENG

Merk: HoverSling Split-Leg har seks (6) slyngestøttestropper som må kobles til.




1. **Alternativ 1** – Plasser HoverSling Split-Leg under pasienten ved hjelp av rulleteknikken, med toppunktet på slyngens hestesko ved pasientens haleben. Løft sengens hodeende.


Alternativ 2 – Løft sengens hodeende. Len pasienten fremover og skyv slyngen bak pasientens rygg til toppunktet av hesteskoen når pasientens haleben. Be pasienten lene seg tilbake for å holde slyngen på plass.



3. Løs ut benfestene på innsiden. Kryss benfestene på innsiden ved å ta én benstøttestropp og føre den gjennom den andre på motsatt side. Fest de indre benstøttene til hengestangen.

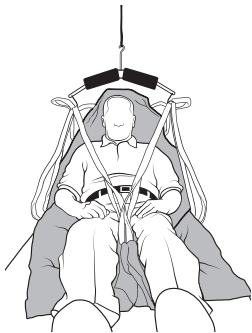


2. Fest skulderstroppene til hengestangen for pasientens sikkerhet og komfort. [Fargekodede stroppløkker gir enkel identifisering, slik at plassering av stropper på pasientens venstre og høyre side blir likt. Kortere stroppløkker ved skuldrene (blå/beige) gir en mer oppreist sitteposisjon, mens lengre skulder- og leggstroppløkker (hvite) øker leningsvinkelen og reduserer hoftefleksjon].

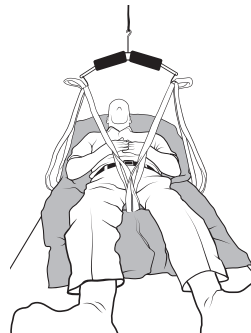


4. Fest de ytre benstøttestroppene til hengestangen


BRUKSANVISNING – TILBAKE I SENGEN

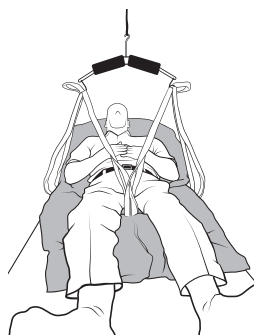

1. Posisjoner pasienten over midten av sengen. Løft hodeenden av sengen og senk pasienten ned på sengen.

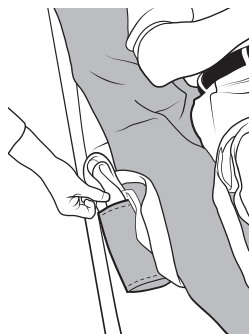


3. Plasser slyngestøttestroppene tilbake i stropplommene på indre og ytre kanter av HoverSling Split-Leg.

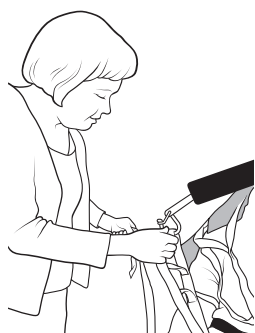


2. Løsne stroppløkkene fra hengestangen.

BRUKSANVISNING – PASIENT I STOL

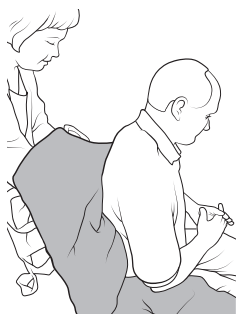


1. Løs ut benstroppene. Len pasienten fremover. Plasser toppunktet av slyngens hestesko bak pasienten til du berører setet, og sikre at slyngen er sentrert på pasientens overkropp. Be pasienten lene seg tilbake mot slyngen for å holde den på plass.

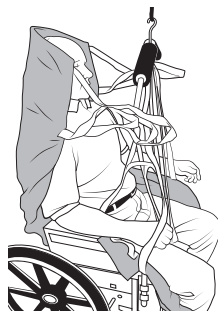

3. Fest skulderstroppene til hengestangen for pasientens sikkerhet og komfort. [Fargekodede stroppløkker gir enkel identifisering, slik at plassering av stropper på pasientens venstre og høyre side blir likt. Kortere stroppløkker ved skuldrene (blå/beige) gir en mer oppreist sitteposisjon, mens lengre skulder- og benstroppløkker (hvite) øker leningsvinkelen og reduserer hoftefleksjon.]




2. Plasser benseksjonene langs siden av hofter og ben, og plasser hver benseksjon under hvert respektive ben.

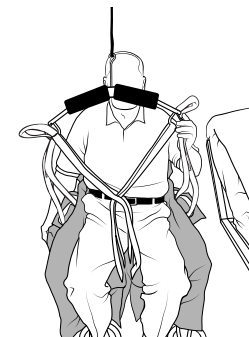

4. Kryss benfestene på innsiden ved å ta én benstøttestropp og føre den gjennom den andre på motsatt side. Fest de indre og ytre benstøttestroppene til hengestangen.

Deleidentifikasjon – HoverSling® flyttelaken

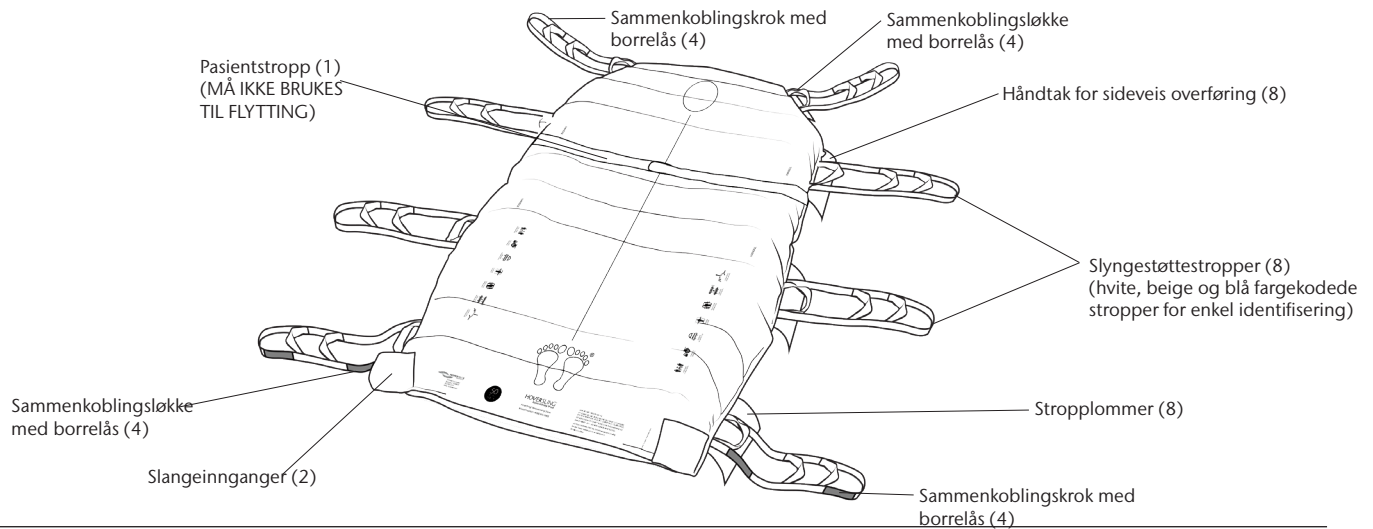

Produktspesifikasjon/nødvendig tilbehør

HOVERSLING® FLYTTELAKEN

Materiale:	Topp: Polyesterstrikk Bunn: Nylonwill
Konstruksjon:	Sydd
Bredde:	99 cm (39") 127 cm (50")
Lengde:	198 cm (78")

Modellnummer: HMSLING-39RS-B – 39" W x 78" L (5 per eske)*
Modellnummer: HMSLING-50RS-B – 50" W x 78" L (5 per eske)*
Modellnummer: HMSLING-39RS-TVA-B – 39" W x 78" L (5 per eske)*
Modellnummer: HMSLING-50RS-TVA-B – 50" W x 78" L (5 per eske)*



GRENSE 454 KG / 1000 LBS

*Pustende modell

NØDVENDIG TILBEHØR FOR BRUK SOM OVERFØRINGS- MADRASS:

Modellnummer: HTAIR1200 (Nord-amerikansk versjon) – 120V~, 60 Hz, 10A
Modellnummer: HTAIR2300 (Europeisk versjon) – 230V~, 50 Hz, 6A
Modellnummer: HTAIR1000 (Japansk versjon) – 100V~, 50/60 Hz, 12,5A
Modellnummer: HTAIR2356 (Koreansk versjon) – 230V~, 50/60 Hz, 6A
Modellnummer: AIR200G (800 W) – 120V~, 60Hz, 10A
Modellnummer: AIR400G (1100 W) – 120V~, 60Hz, 10A

NØDVENDIG TILBEHØR FOR BRUK SOM SLYNGE:

En pasientløfter med 2-, 3- eller 4-punkts hengestang i løkkestil ment for bruk med:

- Mobile løftere
- Løftetraller
- Stasjonære løftere festet til vegg/vegger, gulv og/eller tak
- Stasjonære, frittstående løftere

Feste slyngestroppene for HoverSling® flyttelaken

1. Tre én ende av HoverSling-slyngestroppene gjennom en hvilken som helst del av sengerammen (gavl eller sideskinner kan brukes*) øverst på sengen.
2. Fest kroken på slyngestroppen med borrelås til løkken med borrelås og sikre dem.
3. Gjenta prosessen på motsatt side av sengen.
4. Fest slyngestroppene med borrelås ved hjelp av samme metode i fotenden av sengen.

*i henhold til sengetype og anleggets rutiner.

Merk: Sørg for at slyngestroppene fjernes før pasienten flyttes.

Slyngestroppene kan oppbevares i sidelommene når de ikke er i bruk.

Bruksanvisning for HoverSling® flyttelaken ved bruk som overføringsmadrass


1. Sørg for at slyngestøttestroppene er plassert i stropplommene.
2. Pasienten bør helst ligge på ryggen.
3. Plasser HoverSling-flyttelakenet under pasienten ved hjelp av rulleteknikken og fest pasientens sikkerhetsstropp løst.
4. Sett støpselet på HoverTech Air Supply i en stikkontakt.
5. Sett slangedysen inn i en av de to slangeinngangene i fotenden av HoverSling-flyttelakenet og klikk den på plass.
6. Sørg for at forflytningsoverflatene er så nærmere hverandre som mulig, og lås alle hjulene.
7. Utfør om mulig forflytningen fra en høyere overflate til en lavere overflate.
8. Slå på HoverTech Air Supply.
9. Skyv det oppblåste HoverSling-flyttelakenet i en vinkel, enten med hodet eller føttene først. Når slyngen er halvveis tar den andre pleieren tak i de nærmeste håndtakene og trekker den til ønsket plassering.
10. Sørg for at pasienten er sentrert på ønsket overflate før luften slippes ut.
11. Slå av Air Supply og aktiver sengeskinnene. Løsne pasientstroppen.

MERK: Ved bruk av 50" HoverSling®-flyttelakenet kan det brukes to lufttilførsler for oppblåsing.


Bruksanvisning for HoverSling® flyttelaken ved bruk som slynge

BRUKSANVISNING – PASIENT I SENG

Merk: HoverSling®-flyttelakenet har åtte (8) slyngestøttestropper som må festes.

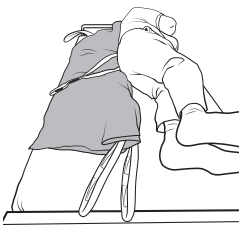


1. Plasser HoverSling-flyttelakenet under pasienten ved hjelp av rulleteknikken.

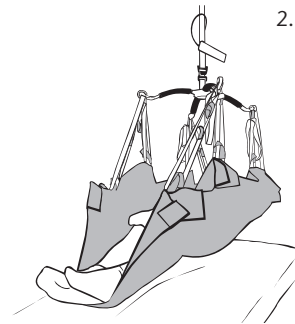

2. Fest alle stropper til hengestangen for pasientens sikkerhet og komfort. [Fargekodete stroppløkker gir enkel identifisering for å sikre samme plassering på pasientens venstre og høyre side.] Løft pasienten i henhold til løfterproduzentens instruksjoner.

BRUKSANVISNING – TILBAKE I SENGEN

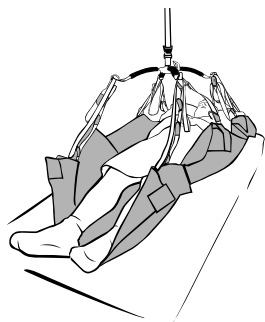


1. Posisjoner pasienten over midten av sengen. Senk pasienten ned på sengen.




3. Plasser slyngestøttestroppene tilbake i stropplommene på indre og ytre kant av HoverSling-flyttelakenet.


2. Løsne stroppløkkene fra hengestangen.

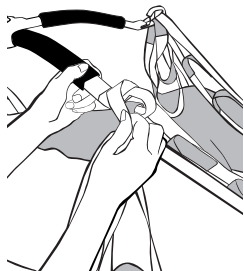

BRUKSANVISNING – SIDEVENDING/VIPPING

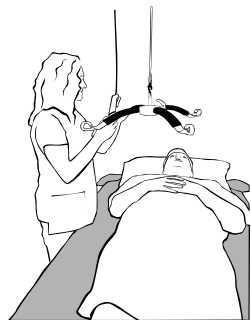


1. Senk hengestangen til en komfortabel arbeidshøyde med pasienten sentrert på HoverSling®-flyttelakenet.

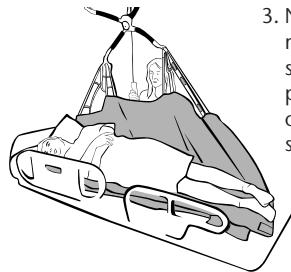


3. Når løfteren heves vil pasienten snus mot motsatt side av sengen i forhold til der stroppene er festet. Bruk kiler til å holde pasienten i posisjon om nødvendig. Når oppgaven er fullført kan hengestangen senkes, og slyngestroppene fjernes.

* For vipping fortsettes vendingen, og pasienten/apparatet justeres etter behov når oppgaven er fullført.

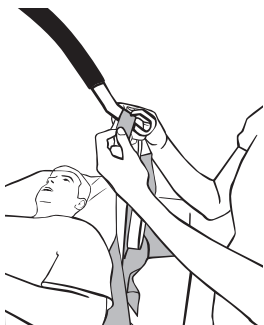

2. Hev sengeskinnene og fest alle fire (4) stropper på motsatt side av pasientvridningen til løkkene på samme side av hengestangen, fra fotenden.

BRUKSANVISNING – HYGIENEVENDING

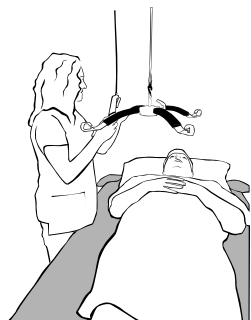


1. Senk hengestangen til en komfortabel arbeidshøyde med pasienten sentrert på HoverSling-flyttelakenet.



3. Når løfteren heves vil pasienten snus mot siden som er motsatt av den tilkoblede stroppen. La slyngen henge mens oppgaven utføres. Når oppgaven er fullført kan hengestangen senkes og slyngestroppen fjernes.


2. Hev sengeskinnene og fest slyngestroppen nærmest pasientens skulder til hengestangen.

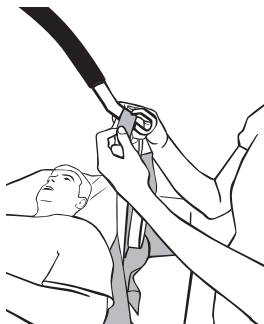


BRUKSANVISNING – SITTENDE FLYTTING FRA SENG




1. Plasser HoverSling-flyttelakenet under pasienten ved hjelp av rulleteknikken. Løft hodeenden av sengen som forberedelse på en sittende overføring.

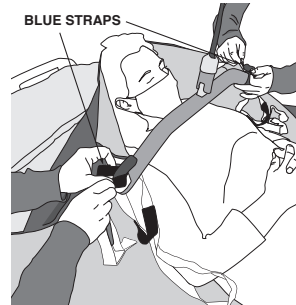

3. Fest den blå slyngestroppen på hver av skuldersidene (for både 39" og 50").

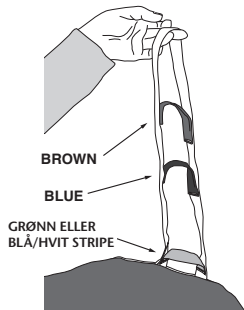

2. Fest stroppene i hodeenden av HoverSling til hengestangen. For en oppreist sitteposisjon brukes overføringshåndtaket (grønn for 39" og blå/hvit stripe for 50"). For en tilbaketilt sitteposisjon – bruk den første slyngestroppen (blå for både 39" og 50") for å redusere hoftefleksjon.

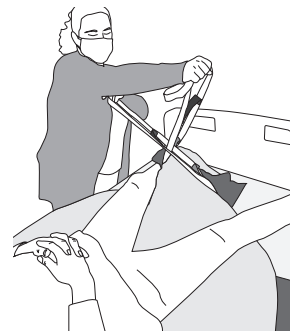


4. Fold HoverSling mellom pasientens ben, og plasser føttene på hver side av HoverSling. Kryss én av slyngestroppene i fotenden gjennom den andre ved den laveste løkken som er nærmest apparatet, og fest den til hengestangen. Flytt pasienten.

BRUKSANVISNING – SITTENDE FLYTTING FRA STOL



1. Sørg for at HoverSling er plassert riktig under pasienten før stroppen festes.

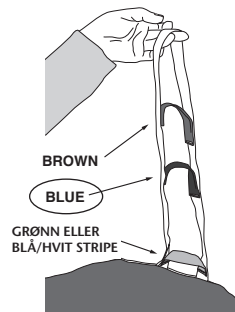

3. Fest den blå slyngestroppen på hver av skuldersidene (for både 39" og 50"). Sørg for at det er tilstrekkelig med slakk i hengestangen, slik at stroppene i fotenden kan festes uten at pasienten sklir av stolen.




2. Fest stroppene i hodeenden av HoverSling til hengestangen. For en oppreist sitteposisjon brukes overføringshåndtaket (grønn for 39" og blå/hvit stripe for 50"). For en tilbaketilt sitteposisjon – bruk den første slyngestroppen (blå for både 39" og 50") for å redusere hoftefleksjon.




4. Fold HoverSling mellom pasientens ben, og plasser føttene på hver side av HoverSling. Kryss én av slyngestroppene i fotenden gjennom den andre ved den laveste løkken som er nærmest apparatet, og fest den til hengestangen. Flytt pasienten.

Identifikasjon av deler – HT-Air® Air Supply

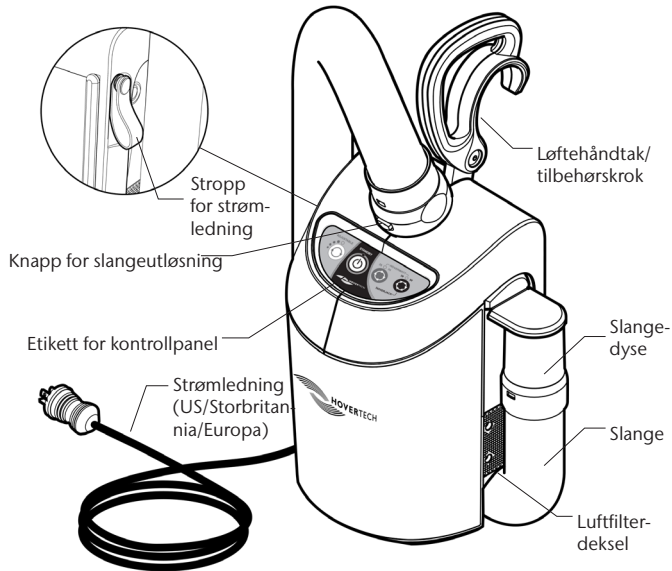

ADVARSEL: HT-Air er ikke kompatibel med likestrømsforsyninger.
HT-Air kan ikke brukes med HoverJack-batterivognen.

Tastaturfunksjoner for HT-Air®

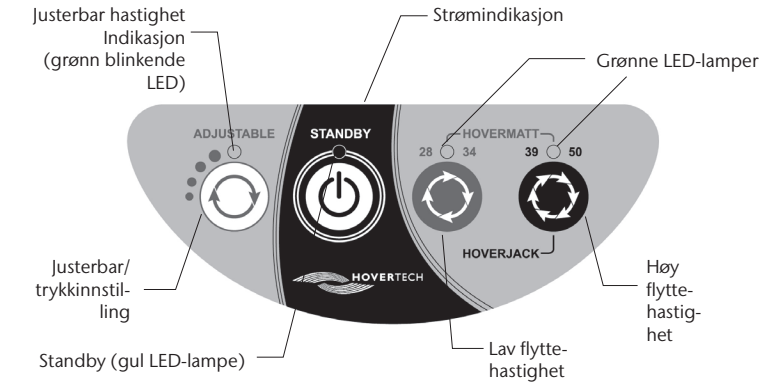

JUSTERBAR: For bruk med HoverTech luftassisterte posisjoneringenheter. Det er fire ulike innstillinger. Hvert trykk på knappen øker lufttrykket og oppblåsingshastigheten. Den grønne blinkende LED-lampen indikerer oppblåsingshastigheten med antall blink (f.eks. tilsvarende to blink den andre oppblåsingshastigheten).

Alle innstillinger i JUSTERBAR-intervallet er betydelig lavere enn HoverMATT- og HoverJack-innstillingene. JUSTERBAR-funksjonen må ikke brukes til flytting.

JUSTERBAR-innstillingen er en sikkerhetsfunksjon som kan brukes for å sikre at pasienten er sentrert på HoverTech luftassisterte enheter, og for gradvis tilvenning av en pasient som er nervøs eller har smerter knyttet til både støy og funksjonalitet for oppblåsningsenhetene.



VENTEMODUS: Brukes for å stoppe oppblåsing/luftstrøm (gul LED-lampe indikerer STANDBY-modus).



HOVERMATT 28/34: For bruk med 28" og 34" HoverMATT og HoverSling.



HOVERMATT 39/50 & HOVERJACK: For bruk med 39" og 50" HoverMATT og HoverSling samt 32" og 39" HoverJack.

Air200G/Air400G-luftforsyninger

Ved bruk av HoverTechs Air200G- eller Air400G-luftforsyninger, trykk på den grå knappen øverst på beholderen for å starte luftstrømmen. Trykk på knappen på nytt for å stoppe luftstrømmen.

Rengjøring

For å bidra til å holde HoverSling ren anbefaler HoverTech bruk av HoverCover™ eller éngangslaken. Det pasienten ligger på for å holde sykehussengen ren kan også plasseres på HoverSling. HoverSling er et produkt for bruk på én pasient, og er ikke ment å kunne vaskes. Enheten må kastes hvis den blir skitten.

FOREBYGGENDE VEDLIKEHOLD

HoverSling må kontrolleres før hver bruk for å sikre at den ikke har noen skader som kan forhindre den tiltenkte bruken. Alle sikkerhetsstroppe, slyngestøttestropper og håndtak må være intakte. Etiketten Må ikke vaskes må være intakt. Det må ikke være noen rifter, hull eller løse tråder. Hvis slike skader blir funnet må HoverSling kastes. HoverSling er ment for bruk under hele pasientens opphold ved sykehuset/pleiehjemmet. Hvis oppholdet overstiger tre måneder bør HoverSling skiftes ut.

INFEKSJONSKONTROLL

Transport og oppbevaring

Dette produktet krever ingen spesielle oppbevaringsforhold.

Hvis HoverSling brukes på isolerte pasienter må sykehuset følge samme protokoll/prosedyrer som brukes for avhending av andre kontaminerte gjenstander for enkeltpasientbruk.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD AV LUFTTILFØRSEL

Se bruksanvisningen for lufttilførselen som en referanse.



Når produktet når enden av sin levetid bør det adskilles etter materialtype, slik at delene kan resirkuleres eller avhendes i henhold til lokale krav.

Returer og reparasjoner

Alle produkter som returneres til HoverTech må ha et RGA-nummer (Returned Goods Authorization) utstedt av selskapet. Ring (800) 471-2776 og spør etter et medlem av RGA-temaet, som vil utstede et RGA-nummer. Produkter som returneres uten et RGA-nummer vil medføre lengre reparasjonstid.

Returnerte produkter sendes til:

HoverTech
Attn: RGA # _____
4482 Innovation Way
Allentown, PA 18109

Europeiske selskaper kan sende returnerte produkter til:



Attn: RGA # _____
Kista Science Tower
SE-164 51 Kista, Sweden

Besøk nettstedet vårt for produktgarantier:
<https://hovermatt.com/standard-product-warranty/>



HoverTech

4482 Innovation Way
Allentown, PA 18109
www.HoverMatt.com
Info@HoverMatt.com

Disse produktene samsvarer med standardene for produkter i klasse 1 av forordningen for medisinsk utstyr (EU) 2017/745 om medisinsk utstyr.



CEpartner4U, ESDOORNLAAN 13,
3951DB MAARN, THE NETHERLANDS.

www.cepartner4u.com



Etac Ltd.

Unit 60, Hartlebury Trading Estate,
Hartlebury, Kidderminster,
Worcestershire, DY10 4JB
+44 121 561 2222

www.etac.com/uk



TapMed Swiss AG

Gumprechtstrasse 33
CH-6376 Emmetten
CHRN-AR-20003070

www.tapmed-swiss.ch

Ved uønskede hendelser knyttet til enheten må hendelsen rapporteres til vår autoriserte representant. Vår autoriserte representant videregir informasjon til produsenten.



4482 Innovation Way
Allentown, PA 18109

800.471.2776
Faks 610.694.9601

www.HoverMatt.com
Info@HoverMatt.com